


DISTRIBUIMOS....





CALIDAD.
INNOVACIÓN.
MADE IN GERMANY.

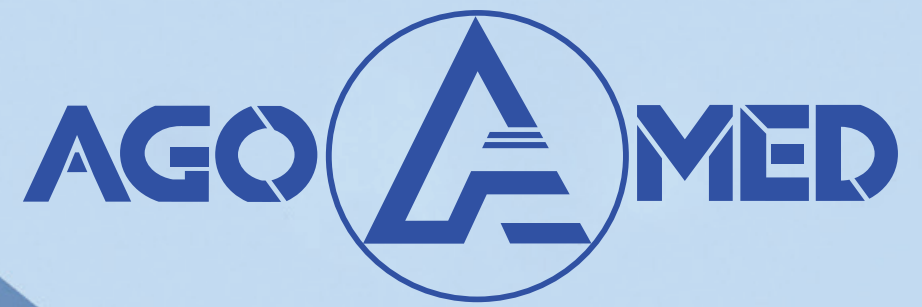

Trabajando con AGOMED significa trabajar con una empresa comprometida con a la excelencia. Nuestros productos son biocompatibles, innovadores y diseñados en Alemania. Nuestro equipo colectivo aporta décadas de experiencia, dedicadas a la tecnología médica.

**Somos de confianza. Somos flexibles.
Somos innovadores.**

AGOMED colabora con distribuidores, hospitales y doctores en todo el mundo, para crear y diseñar soluciones exactas. Trabajamos mano a mano con especialistas para asegurarnos que nuestros implantes de trauma para extremidades mejoren la calidad de vida de los pacientes.

El bienestar de los pacientes siempre es nuestra prioridad número uno.

**AGOMED significa calidad.
Sobrepasamos todos los
requisitos de ISO 13585 y
contamos con el certificado CE.**

CERTIFICADOS




DIN EN ISO
13485:2012




CERTIFICADO EG

TIGMA™ TORNILLOS CANULADOS


ROSCA PARCIAL/COMPLETA

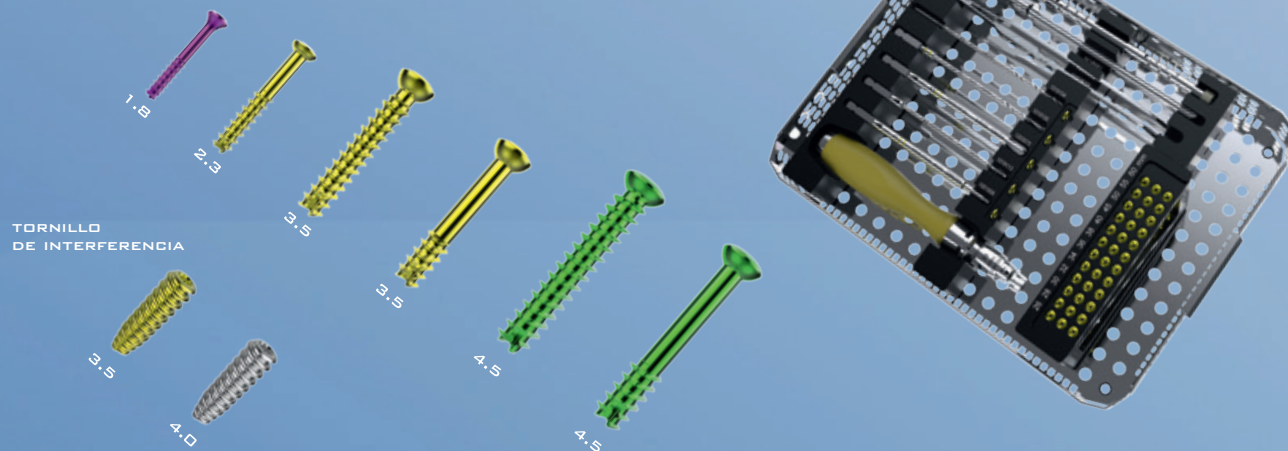

FUSIÓN INTERCARPAL/INTERFALANGEAL
FRACTURAS Y SIN-UNION HUESO CARPINAL
FRACTURAS DE RADIO DISTAL
FRACRURAS ESCAFOIDES
FRACTURAS CABEZA DE RADIO

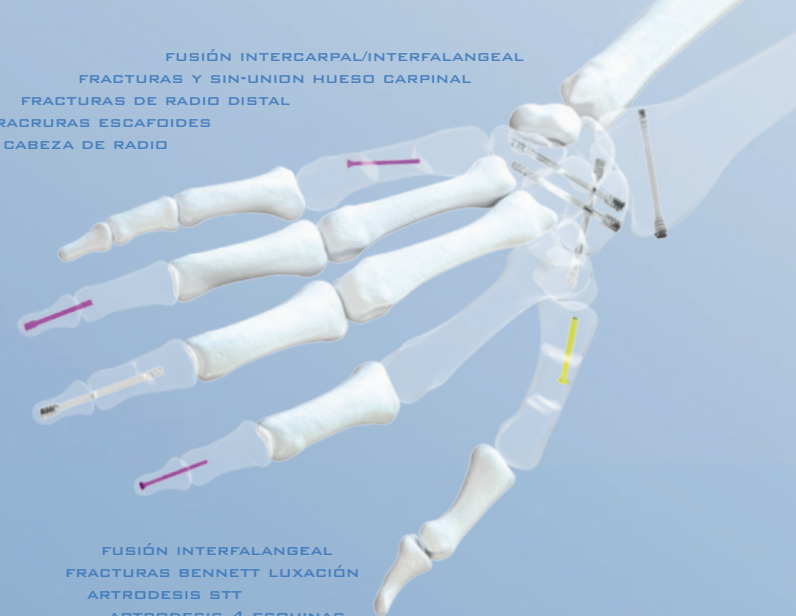

FUSIÓN INTERFALANGEAL
FRACTURAS BENNETT LUXACIÓN
ARTRODESIS STT
ARTRODESIS 4 ESQUINAS
FRACTURA DE ESTILOIDES
FRACTURAS DEL POLO PRÓXIMO DEL ESCAFOIDES

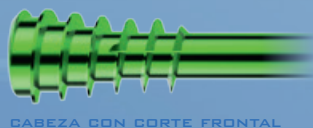


TIGMA™ TORNILLOS DE COMRESIÓN CANULADOS


ROSCA EXTREMADAMENTE AFILADA TRES PUNTAS AFILADAS AUTO ROSCANTES

DISEÑADO PARA QUE EL HUESO PUEDA PASAR CON FACILIDAD ATRAVÉS DEL LADO TRASERO DE LA PUNTA, PERMITIENDO MENOS TORQUE Y FATIGA EN EL MOMENTO DE INSERCIÓN

HOJAS CON CORTE FRONTAL

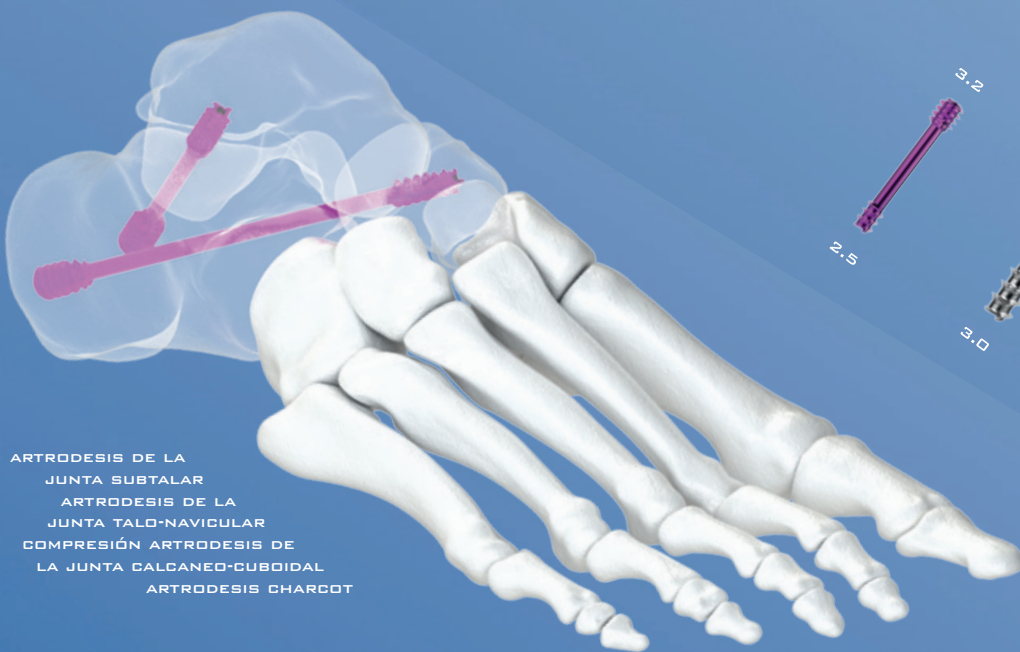

ARTRODESIS DE LA JUNTA SUBTALAR
ARTRODESIS DE LA JUNTA TALO-NAVICULAR
COMPRESIÓN ARTRODESIS DE LA JUNTA CALCANEÓ-CUBOIDAL
ARTRODESIS CHARCOT

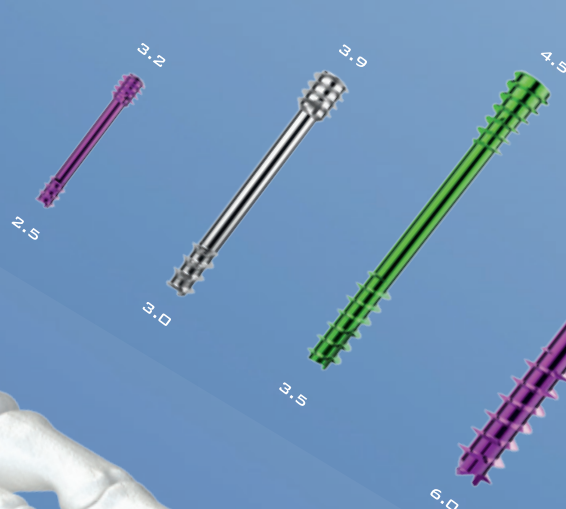

SISTEMA DE PLACAS ANTEPIE 2.7

CADA UNA DE LAS PLACAS ESTÁN DISEÑADAS ESPECIFICAMENTE PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ZONAS DEL PIE Y TOBILLO. TODAS NUESTRAS PLACAS ESTÁN HECHAS DE TITANIO ASTM F136 Y ASTM F67

PRIMER MTP ARTRODESIS
PROCEDIMIENTO AKIN
ARTRODESIS EN TOBILLO
FRACTURAS EN TOBILLO
FRACTURAS DE CALCANEOS
OSTEOTOMIA LATERALIZACIÓN DE CALCANEOS
OSTEOTOMÍA COTTON
ARTRODESIS DIPJ
OSTEOTOMÍA DISTAL
HALLUX IP ARTRODESIS
FRACTURA JONES
ARTRODESIS DE LAPIDUS
ALARGAMIENTO COLUMNA LATERAL
OSTEOTOMÍA LATERALIZACIÓN DE CALCANEOS
FRACTURA / DISLOCACIÓN DE LISFRANC
ARTRODESIS DE COLUMNA MEDIA
ARTRODESIS MEDIAL DOBLE
CORRECCIÓN DE DEFORMIDAD METATARSAL
FRACTURAS DEL METATARSO
OSTEOTOMIA DE RECORTE DEL METATARSO
OSTEOTOMIA MIDSHAFT
FRACTURAS NAVICULARES
ARTRODESIS JUNTA NAVICULO-CUNEIFORME
PIPJ + DIPJ ARTRODESIS
OSTEOTOMIA PROXIMAL
REVISIÓN DEDO MARTILLO
ARTRODESIS JUNTA SUBTALAR
ARTRODESIS DISTRACCIÓN JUNTA SUBTALAR
FRACTURAS CUELLO TALUS
ARTRODESIS JUNTA TALONAVICULAR
ARTRODESIS JUNTA TARSO/METATARSAL
ARTRODESIS TRIPLE



POW PLACA PROXIMAL



PLACA PEDFIX



PLACA AGOSALIS




PLACA PLANTAR LAPIDUS



PLACA GRAUBER LAPIDUS



PLACA DE INTERPOSICIONAMIENTO

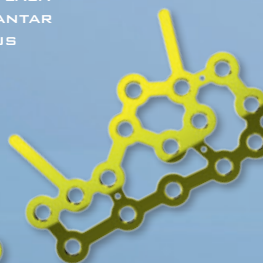

PLACA CALCANEOS



PLACA LAPIDUS



PLACA ARROW





PLACA DWYER

EXTREMIDADES INFERIORES

SISTEMA PLACAS RETROPIE 3.5

MÁS DE 45 PLACAS PARA MEDIO Y RETRO PIE

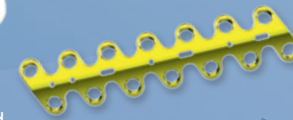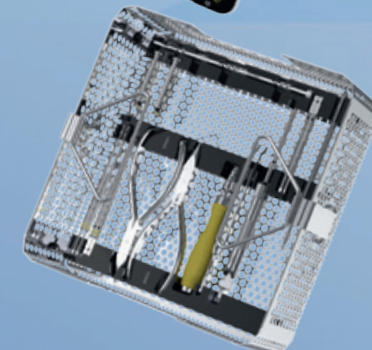

PLACA RECON




TORNILLO CLICK-OFF




TORNILLO BLOQUEADO



TORNILLO ESTÁNDAR

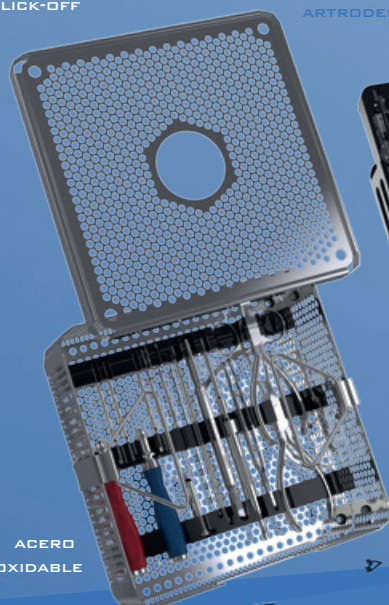

ACERO INOXIDABLE

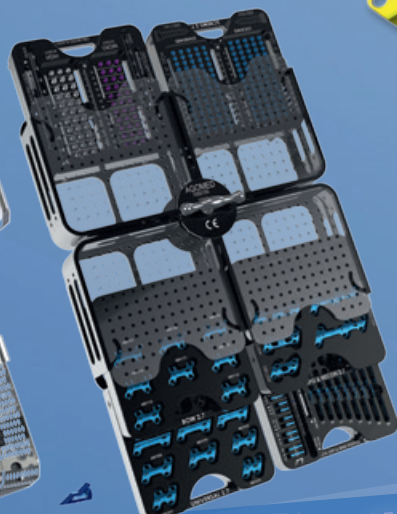

AGOPAQx4

CONTENEDOR MODULAR PARA ESTERILIZACIÓN
MÁS DE 30 CAJAS DISPONIBLES

ARTRODESIS / CORRECCIÓN DE DEFORMIDADES • PIE PLANO • FRACTURAS • HALLUX VALGUS • DEDO MARTILLO

EXTREMIDADES SUPERIORES

ARTRODESIS MUÑECA SISTEMA 2.0 / 2.7

MÁS DE 6 PLACAS DISPONIBLES

BANDEJA IMPLANTES /
INSTRUMENTAL AGOCAN 1.8 / 2.3

PLACAS CABEZA RADIO PROXIMAL / FRACTURAS CUELLO RADIO

DISPONIBLE EN 4 TAMAÑOS DIFERENTES

SISTEMA PLACAS DE MANO 1.2 / 1.7 / 2.3 / 2.7

MÁS DE 45 PLACAS DISPONIBLES

PLACAS 1.2

SISTEMA DE PLACAS RADIO / ULNA DISEÑO
PLANO 1.3 MM DE PERFIL

PLACAS 2.3

TORNILLO
BLOQUEADO 2.3

TORNILLO
ESTANDAR 2.3

PLACAS 1.7

TORNILLO
BLOQUEADO 1.7

TORNILLO
ESTANDAR 1.7

SISTEMA DE PLACAS
ULNA / CLAVICULA

SISTEMA DE
PLACAS RADIO
DISTAL DISEÑO
ULTRA PLANO
PERFIL 1.3 MM

AGO  MED

 **surgival**
GRUPO COSÍAS



KING KONG
SISTEMA DE PLACAS 2.5

Made in Germany

EN Working with AGOMED means working with a company committed to excellence. Our products are German engineered, biocompatible, and cutting-edge. Our team members collectively bring decades of medical technology experience to the table.

We're reliable. We're flexible. We're inventive.

AGOMED collaborates with distributors, hospitals, and doctors worldwide to create and develop exacting, state-of-the-art solutions. We work closely with specialists to insure that our implants for trauma and extremities improve the patient's quality of life.

Patient safety is always our number one priority.

DE Mit AGOMED zu arbeiten, bedeutet mit einem Unternehmen zu arbeiten, dass sich zur Exzellenz und Hochleistung verpflichtet.

Unsere Produkte werden von deutschen Ingenieuren entwickelt, sind biokompatibel, innovativ und auf dem neuesten Stand der Technik. Unser Team hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Medizintechnik.

Wir sind zuverlässig. Wir sind flexibel. Wir sind innovativ.

AGOMED arbeitet weltweit mit Unternehmen, Krankenhäusern und Ärzten zusammen, um anspruchsvolle, hochmoderne Lösungen zu entwickeln. Wir arbeiten eng mit Spezialisten zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Implantate für Traumatologie und Extremitäten die Lebensqualität der Patienten verbessern.

Die Sicherheit der Patienten steht bei uns immer an erster Stelle.

ES Trabajar con AGOMED significa trabajar con una empresa comprometida con la excelencia. Nuestros productos son diseñados en Alemania, biocompatibles y de vanguardia. Los miembros de nuestro equipo aportan, de manera colectiva, décadas de experiencia en tecnología médica.

Somos fiables. Somos flexibles. Somos innovadores.

AGOMED colabora con distribuidores, hospitales y doctores a nivel mundial con el objetivo de crear y desarrollar soluciones rigurosas y con tecnología punta. Cooperamos estrechamente con especialistas para garantizar que nuestros implantes para trauma y extremidades mejoren la calidad de vida de los pacientes.

La seguridad de los pacientes siempre es nuestra prioridad.

QUALITY IS PART OF OUR DNA



DIN EN ISO 13485

AGOMED MEANS QUALITY. WE EXCEED ISO 13485 STANDARDS AND HAVE CE CERTIFICATION.

AGOMED BEDEUTET QUALITÄT. WIR SIND ZERTIFIZIERT NACH ISO 13485 UND HABEN DIE CE ZERTIFIZIERUNG

AGOMED ES SINÓNIMO DE CALIDAD. SUPERAMOS LOS ESTÁNDARES ISO 13485 Y CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN CE.



CE CERTIFICATE

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS / TORNILLOS	2
INDICACIONES	12
INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS	
PLACAS DE TITANIO	14
TORNILLOS DE TITANIO 2.5	23
INSTRUMENTAL	26
CONTENIDO SET	33

KING KONG


SISTEMA DE PLACAS 2.5



SET GRANDE S1464



SET PEQUEÑO S1486

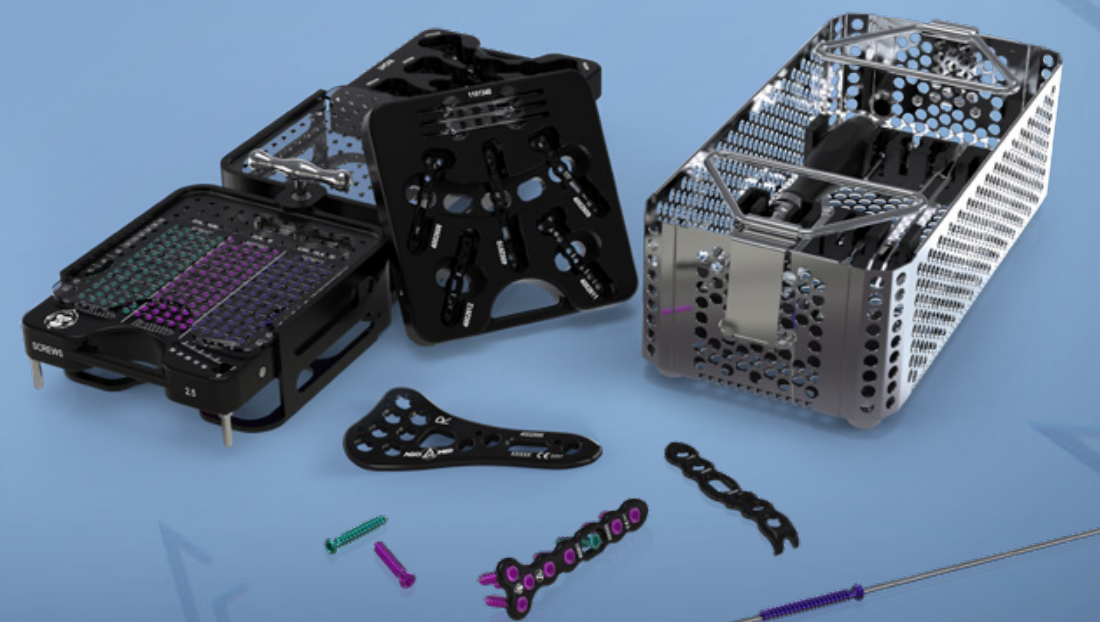

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS

BORDES REDONDEADOS & SUPERFICIE PULIDA

PARA PROTECCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS

2 FILAS DISTALES PARA TORNILLOS

OTORGAN APOYO ÓPTIMO A LA SUPERFICIE ARTICULAR

BORDE DE PLACA CON TRIPLE BISELADO

DISEÑO DE PLACA PRE-PRECONFORMADO ANATÓMICAMENTE

PERFIL BAJO DE PLACA

1.5 MM

GUÍAS DE PERFORACIÓN

COLOCADAS EN LOS ORIFICIOS PARA ASEGURAR UNA INSERCIÓN SEGURA Y SENCILLA

DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD)

LA FORMA PERFECTAMENTE OPTIMIZADA DE LA PLACA FUE OBTENIDA MEDIANTE DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL, LA MISMA QUE SE UTILIZA EN LAS TECNOLOGÍAS AUTOMOTRIZ Y AERODINÁMICA. EL DISEÑO DE LAS PLACAS ASEGURA QUE LAS LÍNEAS SIGAN UNA TRAYECTORIA DEFINIDA, SIN CAMBIOS REPENTINOS DE DIRECCIÓN

FORMA PERFECTAMENTE AERODINÁMICA

PLACAS CON EFECTO MÍNIMO SOBRE TENDONES Y MÚSCULOS EVITAN MOLESTIAS CON EL MOVIMIENTO

- ORIFICIOS PARA LA FIJACIÓN TEMPORAL CON AGUJAS KIRSCHNER
- ES POSIBLE EL POSICIONAMIENTO MUY DISTAL DE LA PLACA
- AJUSTE ANATÓMICO MEJORADO ADAPTADO A LA SUPERFICIE VOLAR DEL RADIO DISTAL
- ESTABILIDAD ANGULAR MULTIDIRECCIONAL DE $\pm 20^\circ$ EN TODAS DIRECCIONES EN CADA ORIFICIO DE TORNILLO

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS

GANCHO PLACA

DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EVITAR O TRATAR LA CONSOLIDACIÓN VICIOSA EN LA APÓFISIS ESTILOIDES CUBITAL

GANCHOS PUNTIAGUDOS

ABRAZAN LA APÓFISIS ESTILOIDES Y SIRVEN COMO PUNTO DE REFERENCIA PARA LA COLOCACIÓN DE LA PLACA

PLACA CUBITAL CON GANCHO

PARA FRACTURAS CAPITALES / SUBCAPITALES Y CONSOLIDACIÓN VICIOSA DEL CUBITO DISTAL

PLACA RADIAL

ANATÓMICAMENTE PRECONFORMADA

PERFIL BAJO DE PLACA
1.5 MM

PLACA DORSAL

ESTABILIZA LA COLUMNA CUBITAL

PLACA CUBITAL

LA POSICIÓN DE LA PLACA PUEDE SER LATERAL (CUBITAL), VOLAR O DORSAL

ORIFICIO OBLONGO Y ORIFICIOS APOYO

PARA FIJACIÓN TEMPORAL CON AGUJAS KIRSCHNER PARA EL POSICIONAMIENTO PRECISO DE LA PLACA

- ESTABILIZA LA COLUMNA RADIAL Y PUEDE EMPLEARSE EN OTROS HUESOS PEQUEÑOS
- FÁCILMENTE CONFORMABLE PARA PROPORCIONAR EL AJUSTE DESEADO

BENEFICIOS CLÍNICOS

LÍNEA DIVISORIA

MEJORA LA COLOCACIÓN DE LA PLACA Y DISMINUYE EL RIESGO DE IRRITACIONES TENDINOSAS

PRIMERA FILA DE TORNILLOS DISTAL

PARA SOPORTE DE LA PORCIÓN CENTRAL DE LA ARTICULACIÓN CARPIANA

SEGUNDA FILA DE TORNILLOS DISTAL

OTORGA ESTABILIZACIÓN DEL BORDE DORSAL

TORNILLOS MULTI-DIRECCIONALES

BLOQUEO CON UN RANGO DE 20° OTORGA FIJACIÓN DE LA PLACA ESPECÍFICA A LA FRACTURA

SUPERFICIE

ANODIZADO TIPO 2 (DOTIZE®) OTORGA UNA SUPERFICIE DE BAJA ADHERENCIA TISULAR, MAYOR RESISTENCIA A FATIGA Y MINIMIZA EL RIESGO DE SOLDADURA EN FRÍO

ORIFICIOS PARA AGUJAS DE KIRSCHNER

PARA APOYAR LA FIJACIÓN TEMPORAL DE LA PLACA

DISEÑO ANATÓMICO DE LA PLACA

APOYA LA REDUCCIÓN DE FRACTURAS COMPLEJAS Y MINIMIZA LA NECESIDAD DE MOLDEO

LA MEJOR FIJACIÓN POSIBLE

RESPETUOSA CON LOS TEJIDOS BLANDOS


PLACAS DISPONIBLES CON Y SIN GUÍAS DE PERFORACIÓN

XXXXXXX*
LOS NÚMEROS DE PLACAS VIENEN CON LAS GUÍAS DE PERFORACIÓN

XXXXXXX
NÚMERO PARA PLACAS SIN GUÍAS DE PERFORACIÓN

- TORNILLOS DE 2.5 MM CONGRUENTES CON EL DIÁMETRO DE TODAS LAS PLACAS OPTIMIZA LA SECUENCIA QUIRÚRGICA Y EL USO DE INSTRUMENTOS
- EL ATORNILLADOR TX7 FACILITA LA INSERCIÓN DE TORNILLOS CON SU DISEÑO AUTO-PORTANTE Y LA RETIRADA DE TORNILLOS CON UNA TRANSMISIÓN DE PAR ÓPTIMA

CARACTERÍSTICAS DE LOS TORNILLOS

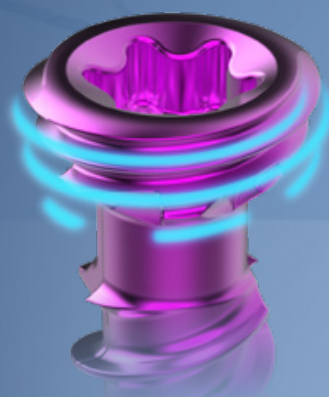

CABEZA CÓNICA ROSCADA

CON DOBLE ROSCA, PRODUCE UN EFECTO DE BLOQUEO GRADUAL QUE OTORGA UNA INSERCIÓN MÁS SEGURA Y UN MOLDEO MEJORADO DE LA PLACA AL HUESO



INSERCIÓN X2 MÁS RÁPIDA CON ROSCAS DE DOBLE PASO



DISEÑO ATRAUMÁTICO DE PUNTA ROMA AUTORROSCANTE


SE DISEÑÓ LA PUNTA PARA SER LO MENOS TRAUMÁTICA POSIBLE AL INSERTARSE, COMO EN PROCEDIMIENTOS DE FIJACIÓN BICORTICAL



FORMA MEJORADA DE 6 ORIFICIOS

MEJORA LA CAPACIDAD DE ENROSCADO DE LA CABEZA DEL TORNILLO DE BLOQUEO A LA PLACA, AÚN EN CONFIGURACIONES FUERA DEL EJE


BLOQUEO

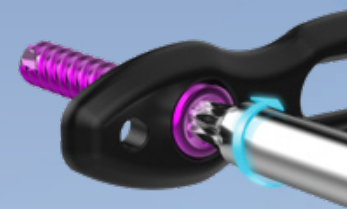

BLOQUEADO




MÍNIMA PROTRUSIÓN DE LA CABEZA

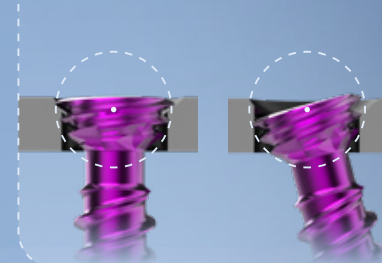

BLOQUEO DE ÁNGULO VARIABLE $\pm 20^\circ$

CONEXIÓN HEXALOBULAR (TX)

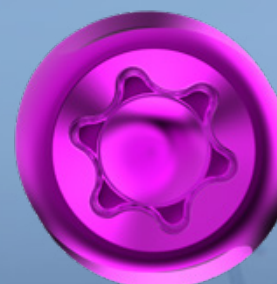

LA FORMA MEJORA EL PAR QUE PUEDE APLICARSE DURANTE LA INSERCIÓN Y RETIRADA DEL TORNILLO, DISMINUYENDO LA PROBABILIDAD DE DEFORMACIÓN POR BARRIDO DEL ALOJAMIENTO



INDICACIONES

- Fijación de fracturas y osteotomías complejas intra y extrarticulares del radio distal
- Fracturas y osteotomías del cúbito distal
- Osteotomías de corrección




INDICACIÓN MUESTRA:

- Fijación de fracturas y osteotomías complejas intra y extrarticulares del radio distal

CONTRAINDICACIONES

- Infección o inflamación (local o sistémica)
- Alergia al material del implante
- Osteomielitis aguda o crónica en, o cerca de, la zona quirúrgica
- Cobertura insuficiente de tejidos
- Edema grave de tejidos blandos que comprometa la curación normal de la herida
- Riesgo de anestesia inaceptablemente alto
- Fracturas en niños y adolescentes con placas epifisarias no calcificadas

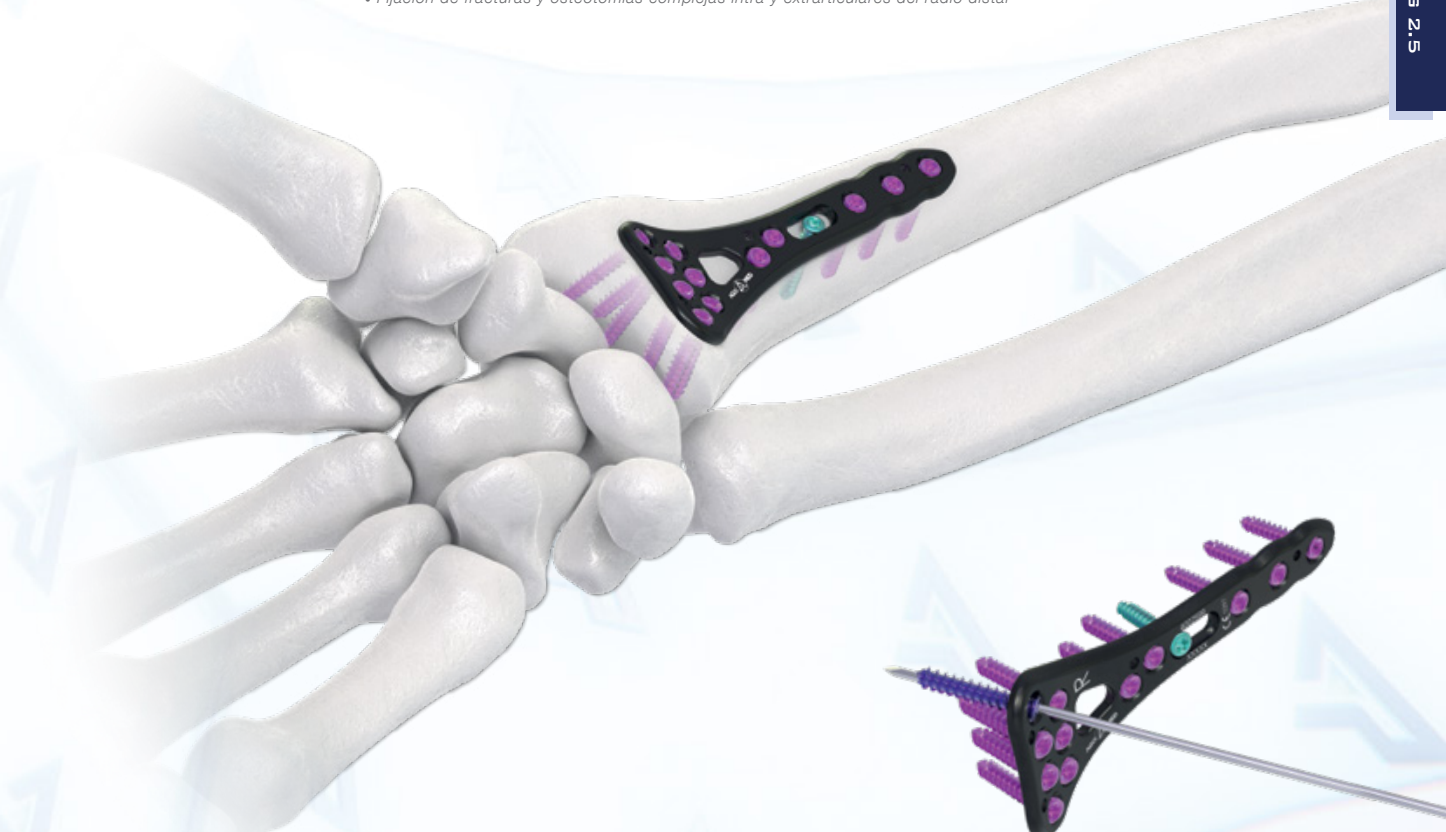



INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

PLACAS DE TITANIO KING



ESTRECHA $\frac{1.5}{1.5}$ mm



4002596
5-agujeros, mediana,
palmar, izquierda



4002597
5-agujeros, mediana,
palmar, derecha



4002596*
5-agujeros, mediana,
palmar, izquierda



4002597*
5-agujeros, mediana,
palmar, derecha



4002598
6-agujeros, grande,
palmar, izquierda



4002599
6-agujeros, grande,
palmar, derecha



4002598*
6-agujeros, grande,
palmar, izquierda



4002599*
6-agujeros, grande,
palmar, derecha



4002594
4-agujeros, pequeña,
palmar, izquierda



4002595
4-agujeros, pequeña,
palmar, derecha



4002594*
4-agujeros, pequeña,
palmar, izquierda



4002595*
4-agujeros, pequeña,
palmar, derecha



BLOQUES GUÍA (ÁNGULO FIJO)



1008054
Estrecha,
izquierda



1008055
Estrecha,
derecha



1008053
Tornillo de
fijación p. guía



PLACAS DE TITANIO KONG



ANCHA $\frac{1.5}{1.5}$ mm



BLOQUES GUÍA (ÁNGULO FIJO)



1008056
Ancha,
izquierda

1008057
Ancha,
derecha

1008053
Tornillo de fijación
p. guía



PLACAS DE TITANIO KING KONG



LARGA 2.0 mm



4002606
11-agujeros, XL, estrecha,
palmar, izquierda

4002607
11-agujeros, XL, estrecha,
palmar, derecha

4002606*
11-agujeros, XL, estrecha,
palmar, izquierda

4002607*
11-agujeros, XL, estrecha,
palmar, derecha



4002614
7-agujeros, L, estrecha,
palmar, izquierda

4002613
7-agujeros, L, estrecha,
palmar, derecha

4002614*
7-agujeros, L, estrecha,
palmar, izquierda

4002613*
7-agujeros, L, estrecha,
palmar, derecha



BLOQUES GUÍA (ÁNGULO FIJO)

1008058
Estrecha L / XL,
izquierda

1008059
Estrecha L / XL,
derecha

1008053
Tornillo de fijación
p. guía



PLACAS DE TITANIO KING KONG



RECTA 1.5 mm

FORMA L 1.5 mm



4002610
6-agujeros



4002610*
6-agujeros



4002609
2/4-agujeros,
derecha



4002608
2/4-agujeros,
izquierda



4002609*
2/4-agujeros,
derecha



4002608*
2/4-agujeros,
izquierda



INDICACIÓN MUESTRA:
• Fracturas y osteotomías del cúbito distal

GANCHO 1.5 mm

FORMA T 1.5 mm



4002612
6-agujeros,
gancho



4002612*
6-agujeros,
gancho



4002611
8-agujeros



4002611*
8-agujeros



MARCO ATRAUMÁTICO DORSAL DE TITANIO



INDICACIÓN MUESTRA:
• Múltiples fracturas en el radio distal con incisión dorsal

1.5 mm



4002615
14-agujeros, tamaño 1,
derecha



4002616
14-agujeros, tamaño 1,
izquierda



4002617
14-agujeros, tamaño 2,
derecha



4002618
14-agujeros, tamaño 2,
izquierda

Las placas de titanio con marco atraumático están disponibles con guías de perforación (4002615*, 4002616*, 4002617*, 4002618*)

TORNILLOS DE TITANIO 2.5



Longitud



Multidireccional,
Cabeza roscada, TX 7




Autoroscantes,
Estandar TX 7



- Doble rosca
- 2x Implantación más rápida

L	Ø 2.5 mm	Ø 2.5 mm	Paq.
10 mm	5028010	5028110	5
11 mm	5028011	5028111	5
12 mm	5028012	5028112	5
13 mm	5028013	5028113	5
14 mm	5028014	5028114	5
15 mm	5028015	5028115	5
16 mm	5028016	5028116	5
17 mm	5028017	5028117	5
18 mm	5028018	5028118	5
19 mm	5028019	5028119	5
20 mm	5028020	5028120	5
21 mm	5028021	5028121	5
22 mm	5028022	5028122	5
23 mm	5028023	5028123	5
24 mm	5028024	5028124	5
25 mm	5028025	5028125	5
26 mm	5028026	5028126	5
27 mm	5028027	5028127	5
28 mm	5028028	5028128	5
29 mm	5028029	5028129	5
30 mm	5028030	5028130	5

Broca-ø 2.0 mm

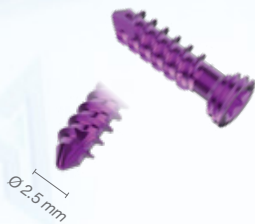



TORNILLOS CANULADOS DE TITANIO 2.5



Longitud



Rosca total,
Cabeza roscada, TX 7


L	Ø 2.5 mm	Paq.
10 mm	5028210	5
11 mm	5028211	5
12 mm	5028212	5
13 mm	5028213	5
14 mm	5028214	5
15 mm	5028215	5
16 mm	5028216	5
17 mm	5028217	5
18 mm	5028218	5
19 mm	5028219	5
20 mm	5028220	5
21 mm	5028221	5
22 mm	5028222	5
23 mm	5028223	5
24 mm	5028224	5
25 mm	5028225	5
26 mm	5028226	5
27 mm	5028227	5
28 mm	5028228	5
29 mm	5028229	5
30 mm	5028230	5



Broca-Ø 2.0 mm



Agujas de Kirschner-Ø 1.1 mm

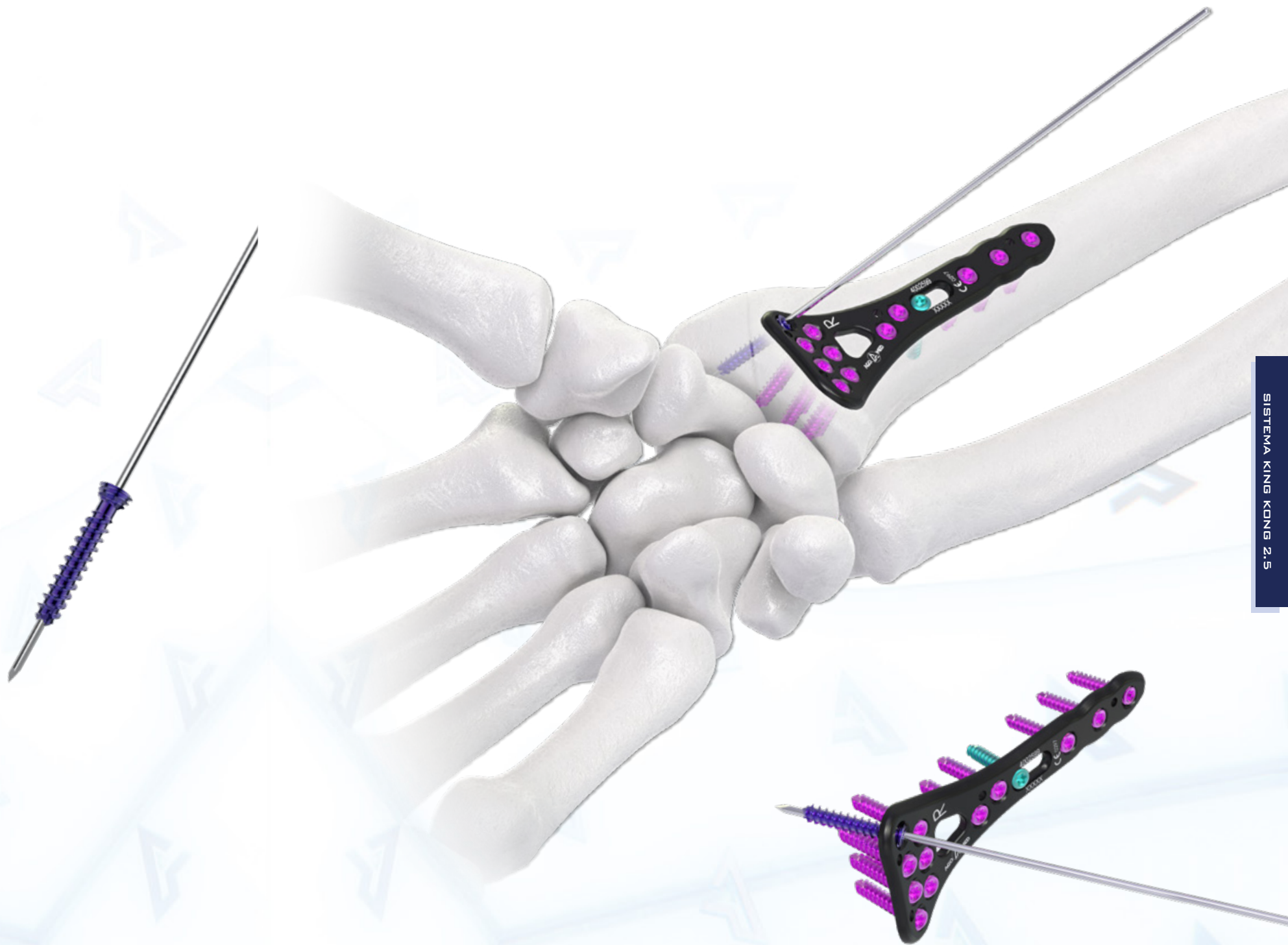



INSTRUMENTAL

1000321

Agopaqx4 soporte p/módulos con implantes c/4 tapas, King Kong sistema, sin módulos p/implantes




1301037

Agopaqx2 soporte p/módulos con implantes c/2 tapas, sin módulos p/implantes




1000376

King Kong bandeja para instrumental, sin instrumental

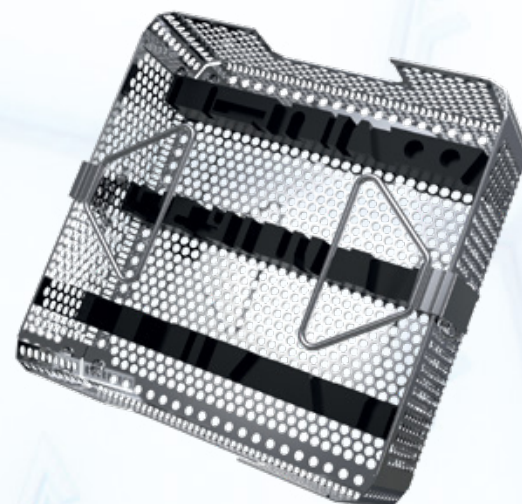

1000438

Agopaqx2 caja para instrumental p/sistema pequeña 2.5, sin instrumental

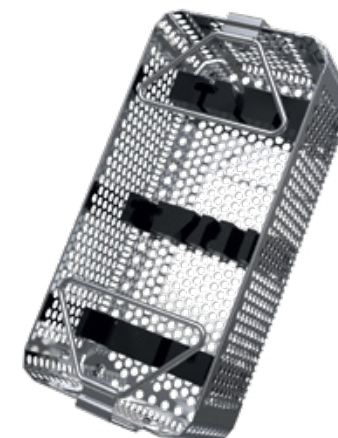

1000380

Agopaqx4 soporte p/placas King Kong sistema 2.5, Ancha, sin implantes




1000381

Agopaqx4 soporte p/placas King Kong sistema 2.5, sin implantes



1000384

Agopaqx4 soporte p/tornillos King Kong sistema 2.5, sin implantes

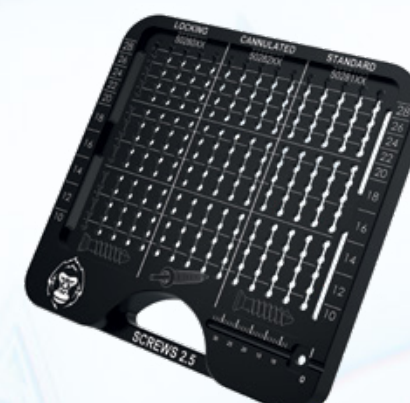



1000379

Agopaqx4 soporte p/placas
King Kong sistema 2.5,
Estrecha, sin implantes



1000382

Agopaqx4 soporte p/placas
King Kong sistema 2.5,
Larga XL, sin implantes



1000322

Agopaqx4 soporte p/placas
King Kong sistema 2.5,
placa marco atraumática,
sin implantes



1000383

Agopaqx4 soporte p/dispositivo
de puntería, King Kong sistema 2.5,
sin implantes



1019106

Broca 2,0 x 95 mm, canulada 1,2 mm
vástago AO, stop 26 mm



1201008

Broca 2,0 x 103 mm,
vástago AO, código gris



1001910

Hoja intercambiable TX 7
no canulada, 90 mm,
vástago AO



1001911

Hoja intercambiable TX 7
canulada, 90 mm,
vástago AO



1004049

Mango destornillador silicona
canulado, grande, 15 cm, negro,
vástago-AO



1006002

Agomed medidor profundidad
60 mm, p/tornillos 2,0 - 4,5 mm





1002527

Pinza de titanio p/placas
y tornillos, 15cm/6" angulada



1101340

Oliva broca filiforme Kirschner,
rosca 10 mm, trocar/redondo,
60 x 1,1 mm, pack/1



1101023

Agujas Kirschner
100 x 1,1 mm,
trocar/redondo, paq./6



1101063

Werber CBS-agujas Kirschner
150 x 1,4 mm,
trocar/redondo, paq./6




1104009

Agomed dispensador
agujas Kirschner, 15 cm/6",
p/agujas de 0,8 - 1,6 mm



1008009

Mango solo p/guía de
broca sistemas mano

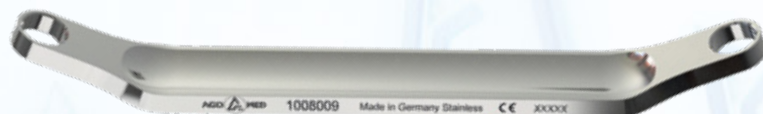


1005620

Alicates doblaplacas,
bocas planas,
13,5cm/5 1/2"



1008041

Guía con rosca,
broca ø 2.0, 0°-10°

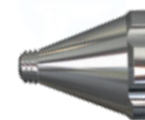

1008052

Guía con rosca,
L 45, broca ø 2.0, 0°



1008066

Guía broca p/tornillos,
variable, longitud 35 mm



1008068

Guía p/tornillos, variable,
agujas Kirschner ø 1.1,
longitud 35 mm



1008069

Guía de reducción de casquillos,
agujas Kirschner ø 1.1,
longitud 35 mm





1008053

Tornillo de fijación para
guía, King Kong



1008054

Guía para Radio 2.5,
estrecha, izquierda



1008055

Guía para Radio 2.5,
estrecha, derecha



1008056

Guía para Radio 2.5,
ancha, izquierda



1008057

Guía para Radio 2.5,
ancha, derecha



1008058

Guía para Radio 2.5, larga
estrecha L / XL, izquierda



1008059

Guía para Radio 2.5, larga
estrecha L / XL, derecha



SET S1464 - SISTEMA KING KONG 2.5



Pos.	Cat.No.	Descripción	Cant.	Página
Bandejas				
1	1000321	AGOPAQX4 SOPORTE P/MODULES CON IMPLANTES C/4 TAPAS, KING KONG SISTEMA, SIN MODULOS P/IMPLANTES	1	26
2	1000322	AGOPAQX4 SOPORTE P/PLACAS KING KONG SISTEMA 2.5, PLACA MARCO ATRAUMÁTICA, SIN IMPLANTES	1	28
3	1000376	KING KONG BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, SIN INSTRUMENTAL	1	26
4	1000379	AGOPAQX4 SOPORTE P/PLACAS SISTEMA 2.5, ESTRECHA, SIN IMPLANTES	1	28
5	1000380	AGOPAQX4 SOPORTE P/PLACAS KING KONG SISTEMA 2.5, ANCHA, SIN IMPLANTES	1	27
6	1000381	AGOPAQX4 SOPORTE P/PLACAS SISTEMA 2.5, SIN IMPLANTES	1	27
7	1000382	AGOPAQX4 SOPORTE P/PLACAS KING KONG SISTEMA 2.5, LARGA XL, SIN IMPLANTES	1	28
8	1000383	AGOPAQX4 SOPORTE P/DISPOSITIVO DE PUNTERÍA, KING KONG SISTEMA 2.5, SIN IMPLANTES	1	28
9	1000384	AGOPAQX4 SOPORTE P/TORNILLOS SISTEMA 2.5, SIN IMPLANTES	1	27
Instrumental				
10	1001910	HOJA INTERCAMBIABLE TX 7 NO CANULADA, 90 MM, VASTAGO AO	1	29
11	1001911	HOJA INTERCAMBIABLE TX 7 CANULADA, 90 MM, VASTAGO AO	1	29
12	1004049	MANGO DESTORNILLADOR SILICONA CANULADO, GRANDE, 15 CMS, NEGRO, VASTAGO-AO	2	29

Pos.	Cat.No.	Descripción	Cant.	Página
13	1005620	PINZA DOBLAR PLACAS, BOCAS PLANAS, 13,5CM/5 1/2"	2	31
14	1006002	AGOMED MEDIDOR PROFUNDIDAD 60 MM P/TORNILLOS 2,0 - 4,5 MM	1	29
15	1201008	BROCA 2,0 X 103 MM, VÁSTAGO AO, CÓDIGO GRIS	1	29
16	1008041	GUÍA DE BROCA, ATORNILLABLE, BROCA Ø2.0, 0°-10°, SISTEMA 2.5	1	31
17	1008052	GUÍA CON ROSCA, L 45, BROCA Ø2.0, 0°	1	31
18	1008053	TORNILLO DE FIJACIÓN PARA GUÍA, KING KONG	1	15
19	1008054	GUÍA PARA RADIO 2.5, ESTRECHA, IZQUIERDA	1	15
20	1008055	GUÍA PARA RADIO 2.5, ESTRECHA, DERECHA	1	15
21	1008056	GUÍA PARA RADIO 2.5, ANCHA, IZQUIERDA	1	17
22	1008057	GUÍA PARA RADIO 2.5, ANCHA, DERECHA	1	17
23	1008058	GUÍA PARA RADIO 2.5, LARGA ESTRECHA L / XL, IZQUIERDA	1	19
24	1008059	GUÍA PARA RADIO 2.5, LARGA ESTRECHA L / XL, DERECHA	1	19
25	1019106	BROCA 2,0 X 95 MM, CANULADA 1,2 MM VASTAGO AO, STOP 26 MM	1	29
26	1101023	AGUJAS KIRSCHNER 100 X 1,1 MM TROCAR/REDONDO, PAQ./6	1	30
27	1101063	WERBER CBS-AGUJAS KIRSCHNER 150 X 1,4 MM, TROCAR/REDONDO, PAQ./6	1	30
28	1104009	AGOMED DISPENSADOR AGUJAS KIRSCHNER 15 CM/6", P/AGUJAS DE 0,8 - 1,6 MM	2	30



SET PEQUEÑO S1486 - SISTEMA KING KONG 2.5



Nr.	Cat.No.	Descripción	Cant.	Página
Placas				
29	4002594	PLACA DE TITANIO, 4-AGUJEROS, ESTRECHA, PEQUEÑA, PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	14
30	4002595	PLACA DE TITANIO, 4-AGUJEROS, ESTRECHA, PEQUEÑA, PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	14
31	4002596	PLACA DE TITANIO, 5-AGUJEROS, ESTRECHA, MEDIANA, PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	15
32	4002597	PLACA DE TITANIO, 5-AGUJEROS, ESTRECHA, MEDIANA, PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	15
33	4002598	PLACA DE TITANIO, 6-AGUJEROS, ESTRECHA, GRANDE, PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	15
34	4002599	PLACA DE TITANIO, 6-AGUJEROS, ESTRECHA, GRANDE, PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	15
35	4002600	PLACA DE TITANIO, 4-AGUJEROS, ANCHA PEQUEÑA PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	16
36	4002601	PLACA DE TITANIO, 4-AGUJEROS, ANCHA PEQUEÑA PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	16
37	4002602	PLACA DE TITANIO, 5-AGUJEROS, ANCHA MEDIANA, PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	17
38	4002603	PLACA DE TITANIO, 5-AGUJEROS, ANCHA MEDIANA, PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	17
39	4002604	PLACA DE TITANIO, 6-AGUJEROS, ANCHA GRANDE, PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	17
40	4002605	PLACA DE TITANIO, 6-AGUJEROS, ANCHA GRANDE, PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	17
41	4002606	PLACA DE TITANIO LARGA XL, 11-AGUJEROS ESTRECHA, PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	19
42	4002607	PLACA DE TITANIO LARGA XL, 11-AGUJEROS ESTRECHA, PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	19
43	4002608	PLACA DE TITANIO, 2/4-AGUJEROS, FORMA L, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	20
44	4002609	PLACA DE TITANIO, 2/4-AGUJEROS, FORMA L, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	20
45	4002610	PLACA DE TITANIO, 6-AGUJEROS, RECTA, SISTEMA 2.5	1	20
46	4002611	PLACA DE TITANIO, 8-AGUJEROS, FORMA T, SISTEMA 2.5	1	21
47	4002612	PLACA DE TITANIO, 6-AGUJEROS, GANCHO, SISTEMA 2.5	1	21
48	4002613	PLACA DE TITANIO LARGA L, 7-AGUJEROS ESTRECHA, PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	18
49	4002614	PLACA DE TITANIO LARGA L, 7-AGUJEROS ESTRECHA, PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	18
50	4002615	PLACA MARCO ATRAUMÁTICA DE TITANIO, 14-AGUJEROS, TAMAÑO 1, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	22
51	4002616	PLACA MARCO ATRAUMÁTICA DE TITANIO, 14-AGUJEROS, TAMAÑO 1, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	22
52	4002617	PLACA MARCO ATRAUMÁTICA DE TITANIO, 14-AGUJEROS, TAMAÑO 2, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	22
53	4002618	PLACA MARCO ATRAUMÁTICA DE TITANIO, 14-AGUJEROS, TAMAÑO 2, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	22
Tornillos				
54	5028010	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 10 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
55	5028012	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 12 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	2	23

Pos.	Cat.No.	Descripción	Cant.	Página
56	5028014	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 14 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	2	23
57	5028016	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 16 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	2	23
58	5028018	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 18 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	2	23
59	5028020	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 20 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
60	5028022	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 22 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
61	5028024	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 24 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
62	5028026	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 26 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
63	5028028	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 28 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
64	5028030	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 30 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
65	5028110	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 10 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
66	5028112	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 12 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	2	23
67	5028114	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 14 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	2	23
68	5028116	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 16 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	2	23
69	5028118	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 18 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	2	23
70	5028120	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 20 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
71	5028122	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 22 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
72	5028124	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 24 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
73	5028126	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 26 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
74	5028128	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 28 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
75	5028130	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 30 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
76	5028210	TORNILLO TITANIO 2,5 X 10 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
77	5028212	TORNILLO TITANIO 2,5 X 12 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	2	24
78	5028214	TORNILLO TITANIO 2,5 X 14 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	2	24
79	5028216	TORNILLO TITANIO 2,5 X 16 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	2	24
80	5028218	TORNILLO TITANIO 2,5 X 18 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	2	24
81	5028220	TORNILLO TITANIO 2,5 X 20 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
82	5028222	TORNILLO TITANIO 2,5 X 22 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
83	5028224	TORNILLO TITANIO 2,5 X 24 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
84	5028226	TORNILLO TITANIO 2,5 X 26 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
85	5028228	TORNILLO TITANIO 2,5 X 28 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
86	5028230	TORNILLO TITANIO 2,5 X 30 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24

Pos.	Cat.No.	Descripción	Cant.	Página
Bandejas				
1	1301037	AGOPAQX2 SOPORTE P/MODULES CON IMPLANTES C/2 TAPAS, SIN MODULES P/IMPLANTES	1	26
2	1000379	AGOPAQX4 SOPORTE P/PLACAS SISTEMA 2.5, ESTRECHA, SIN IMPLANTES	1	28
3	1000438	AGOPAQX2 CAJA PARA INSTRUMENTAL P/SISTEMA PEQUEÑA 2.5, SIN INSTRUMENTAL	1	27
4	1000381	AGOPAQX4 SOPORTE P/PLACAS SISTEMA 2.5, SIN IMPLANTES	1	27
5	1000384	AGOPAQX4 SOPORTE P/TORNILLOS SISTEMA 2.5, SIN IMPLANTES	1	27
Instrumental				
6	1001910	HOJA INTERCAMBIABLE TX 7 NO CANULADA, 90 MM, VASTAGO AO	1	29
7	1001911	HOJA INTERCAMBIABLE TX 7 CANULADA, 90 MM, VASTAGO AO	1	29
8	1004049	MANGO DESTORNILLADOR SILICONA CANULADO, GRANDE, 15 CMS, NEGRO, VASTAGO-AO	1	29
9	1002527	PINZA P/PLACAS Y TORNILLOS 15CM/6" ANGULADA	1	30
10	1006002	AGOMED MEDIDOR PROFUNDIDAD 60 MM P/TORNILLOS 2,0 - 4,5 MM	1	29
11	1008009	MANGO SOLO P/GUÍA DE BROCA SISTEMAS MANO	1	30
12	1008041	GUÍA DE BROCA, ATORNILLABLE, BROCA Ø2.0, 0°-10°, SISTEMA 2.5	1	31
13	1008052	GUÍA CON ROSCA, L 45, BROCA Ø2.0, 0°	2	31
14	1008066	GUÍA BROCA P/TORNILLOS, VARIABLE, LONGITUD 35 MM, SISTEMA 2.5	1	31
15	1008068	GUÍA P/TORNILLOS, VARIABLE, AGUJAS KIRSCHNER Ø1.1, LONGITUD 35 MM, SISTEMA 2.5	1	31

Pos.	Cat.No.	Descripción	Cant.	Página
16	1008069	GUÍA DE REDUCCIÓN DE MANGAS, AGUJAS KIRSCHNER Ø1.1, LONGITUD 35 MM, SISTEMA 2.5	1	31
17	1101340	OLIVE BROCA FILIFORME KIRSCHNER, ROSCA 10 MM, TROCAR/REDONDO, 60 X 1,1 MM, SISTEMA 2.5, PACK/1	3	30
18	1019106	BROCA 2,0 X 95 MM, CANULADA 1,2 MM VASTAGO AO, STOP 26 MM	1	29
19	1101023	AGUJAS KIRSCHNER 100 X 1,1 MM TROCAR/REDONDO, PAQ./6	1	30
20	1201008	BROCA 2,0 X 103 MM, VÁSTAGO AO, CÓDIGO GRIS	1	29
21	1101063	WERBER CBS-AGUJAS KIRSCHNER 150 X 1,4 MM, TROCAR/REDONDO, PAQ./6	1	30
22	1104009	AGOMED DISPENSADOR AGUJAS KIRSCHNER 15 CM/6", P/AGUJAS DE 0,8 - 1,6 MM	2	30
Placas				
23	4002594	PLACA DE TITANIO, 4-AGUJEROS, ESTRECHA, PEQUEÑA, PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	14
24	4002595	PLACA DE TITANIO, 4-AGUJEROS, ESTRECHA, PEQUEÑA, PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	14
25	4002596	PLACA DE TITANIO, 5-AGUJEROS, ESTRECHA, MEDIANA, PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	15
26	4002597	PLACA DE TITANIO, 5-AGUJEROS, ESTRECHA, MEDIANA, PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	15
27	4002598	PLACA DE TITANIO, 6-AGUJEROS, ESTRECHA, GRANDE, PALMAR, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	15
28	4002599	PLACA DE TITANIO, 6-AGUJEROS, ESTRECHA, GRANDE, PALMAR, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	15
29	4002608	PLACA DE TITANIO, 2/4-AGUJEROS, FORMA L, IZQUIERDA, SISTEMA 2.5	1	20



Pos.	Cat.No.	Descripción	Cant.	Página
30	4002609	PLACA DE TITANIO, 2/4-AGUJEROS, FORMA L, DERECHA, SISTEMA 2.5	1	20
31	4002610	PLACA DE TITANIO, 6-AGUJEROS, RECTA, SISTEMA 2.5	1	20
32	4002611	PLACA DE TITANIO, 8-AGUJEROS, FORMA T, SISTEMA 2.5	1	21
33	4002612	PLACA DE TITANIO, 6-AGUJEROS, GANCHO, SISTEMA 2.5	1	21
Tornillos				
34	5028010	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 10 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
35	5028012	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 12 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	2	23
36	5028014	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 14 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	2	23
37	5028016	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 16 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	2	23
38	5028018	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 18 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	2	23
39	5028020	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 20 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
40	5028022	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 22 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
41	5028024	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 24 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
42	5028026	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 26 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
43	5028028	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 28 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
44	5028030	TORNILLO TITANIO, 2,5 X 30 MM, CABEZA ROSCADA, MULTIDIRECCIONAL, TX 7, PAQ./5	1	23
45	5028110	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 10 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
46	5028112	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 12 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	2	23
47	5028114	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 14 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	2	23
48	5028116	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 16 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	2	23
49	5028118	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 18 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	2	23
50	5028120	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 20 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23

Pos.	Cat.No.	Descripción	Cant.	Página
51	5028122	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 22 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
52	5028124	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 24 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
53	5028126	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 26 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
54	5028128	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 28 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
55	5028130	TORNILLO TITANIO ESTANDAR 2,5 X 30 MM, AUTOROSCANTES, TX 7, PAQ./5	1	23
56	5028210	TORNILLO TITANIO 2,5 X 10 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
57	5028212	TORNILLO TITANIO 2,5 X 12 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	2	24
58	5028214	TORNILLO TITANIO 2,5 X 14 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	2	24
59	5028216	TORNILLO TITANIO 2,5 X 16 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	2	24
60	5028218	TORNILLO TITANIO 2,5 X 18 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	2	24
61	5028220	TORNILLO TITANIO 2,5 X 20 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
62	5028222	TORNILLO TITANIO 2,5 X 22 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
63	5028224	TORNILLO TITANIO 2,5 X 24 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
64	5028226	TORNILLO TITANIO 2,5 X 26 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
65	5028228	TORNILLO TITANIO 2,5 X 28 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24
66	5028230	TORNILLO TITANIO 2,5 X 30 MM CANULADO, CABEZA ROSCADA, ROSCA TOTAL, TX 7, PAQ./5	1	24

MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS

2010004

Plating system for
Upper Extremities



2010015

Cannulated
Screws



2010002

Foot & Ankle
system



NEW 2010053

Anterior 4.0
system



2010033

AgoFix 4.0
system



2010030

Pediatric
Screw system 6.2




2010017

AGO-Pediatric
system 3.5 / 4.0



2010003

Titanium plating system
for craniomaxillofacial osteosynthesis

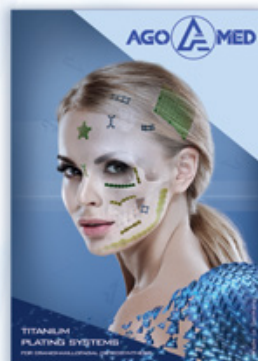

2010008

AgoFix Neuro
Plating system 1.5



2010016

Titanium Mesh systems for
craniomaxillofacial osteosynthesis / Neuro





AGOMED
MEDIZIN-TECHNIK GMBH
ÖSCHWEG 29 - D-78567
FRIDINGEN - GERMANY

☎ (+49) 7463 / 267 06 16
✉ info@agomed.com
🌐 <http://www.agomed.com>

MADE IN GERMANY

Ref.num. 2010067
Revision 01 / 12.2020



SURGIVAL · GRUPO COSÍAS

FÁBRICA E INTERNACIONAL:
Leonardo Da Vinci, 12-14, 46980
Parque Tecnológico Paterna
Valencia, España

DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA:
Ignasi Iglesias, 70, 08950,
Esplugues de Llobregat,
Barcelona, España